


СИМВОЛЬ

Символы	Описание	Символы	Описание
	Стереодизайн		Стереодизайн

STERILE EO

	Потребное использование запрещено		Использовать до (ГТТ-АММД) (проектировки)
	Потребная стерилизация запрещена		Дата производства (ГТТ-АММ, год/месяц)
	Ин. инструкции по применению		Серийный номер
	Хранить при температуре от 5°C до 30°C		Оптический диаметр
	Изолировать		Осевой диаметр (основной диаметр вены)
	Хранить вдали от источников лучей		
	Не использовать при повреждении упаковки		
	HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. 10 Boppps Road #04-01/06, Chromos, Singapore 139870		
	Место осуществления производства: HOYA Langpin Ltd. 75/2 Moo 4, Tambol Bantlang,		

Рис. 5. Илор 1. Брустеве CRM

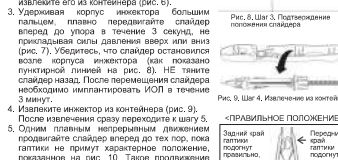

длина волны (нм)

плунжера должно длиться около 5 секунд.

По мере продвижения поршня к заднему краю оптики особенно внимательно следите за тем, чтобы задний край галтики подгибался

правильно. По мере продвижения линзы

следите за тем, чтобы передний и задний край галтики подгибались правильно, а поршень протискивался край станины по центру (рис. 10).

Если все в порядке, то сразу пер

- шагу 8. Если защитный экран не используется, то переместите в шаг 6А. При использовании защитного экрана переходите в шаг 6Б. ЗАПРЕЩЕНО! Продолжить протирание пинцетом, если один или оба глаза пациента находятся в неправильном положении или если концы поршня не проталкивают края глаза по шагу 11.
- «НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»**
- | Правильная позиция | Защитная палочка |
|-----------------------------|--|
| Пальцы не попадают на глаз. | Пальцы не попадают. |
| Глаз не поднимается. | Концы поршня накладываются на верхнюю прослойку под глаза. |
| | Пальцы дифференцируют обесцвеченные участки поршня. |
- Рис. 11. Шаг 5. При неправильном положении продолжать процедуру закрывания.
6. Варьируйте глубину введения наконечника индикатора
- 6А. Защитный экран. Вариант А: введение в капсульный мешок глаза. Используйте индикатор, не смещая защитный экран из начального положения. Сразу переходите к ИМПЛАНТАЦИИ, шаг 1-4.
- ПРИМЕНЕНИЕ защитного экрана**
После введения индикатора в мешок глаза в НЕ-ПЭЭЯ индикатор не вытаскивайте.
- 6Б. Защитный экран. Вариант Б: введение по каналу поршня. Удерживайте корпус индикатора и осторожно протолкните индикатор и его острие в отверстие капсульного мешка. Оставьте индикатор в конечном положении (рис. 1-2). Не терпите защитный экран назад. Сразу переходите к ИМПЛАНТАЦИИ, шаг 1-4.
- Рис. 12. Шаг 6Б. Проталкивание защитного экрана.
- ПРОЦЕДУРА ИМПЛАНТАЦИИ**
1. Введение кончика индикатора.
- 1А. Защитный экран. Вариант А: введение в капсульный мешок глаза. Перед введением наконечника индикатора в разрез глаза поверните индикатор отверстием наконечника вниз. Это обеспечит равномерное введение.
- 1Б. Защитный экран. Вариант Б: введение по каналу поршня. Перед введением наконечника индикатора в разрез глаза поверните индикатор отверстием наконечника вниз. Это обеспечит равномерное введение.

2. Варианты имплантации ИОЛ.

2А. Вариант имплантации А: вращению винта инъектора. Плавно поверните винт инъектора по часовой стрелке, чтобы ввести лие в капсульный мешок глаза. Во время продвижения ЗАПРЕЩАЕТСЯ поворачивать винт противоположного направления. Вращать сам инжектор НЕ требуется.

2Б. Вариант имплантации Б: накатке плуэжера.

Медленно нажимайте на палец вперед, чтобы ввести линзу в капсулу глаза. Во время продвижения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** тянуть палец назад. Вращать сам инjekтор НЕ требуется.

3. Убедитесь, что задний край галтики полностью вышел из кончика, после чего извлеките инjekтор из разреза.

4. Откорректируйте положение линзы при помощи крючка или другого инструмента.

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ТОВАРА

По вопросам возврата или замены линзы следует обращаться к местному представителю.

ЛИЧНАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА
Личная карта пациента входит в состав упаковки, она должна быть заполнена передана пациенту. Пациент сможет ее использовать в будущем при необходимости проведения офтальмологических процедур.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Интраокулярная линза (ИОЛ) HOYA Nanex™ multiSert™ поставляется стерильной в стерильной упаковке и предназначена только для одноразового использования.

СРОК ГОДНОСТИ Срок годности указан на этикетке наружной упаковки в следующем формате: четырехзначное обозначение — год, двухзначное обозначение — месяц, двухзначное обозначение — день. Имплантирование изделия после истечения указанного срока годности запрещено.

RU1.MS1.NC1SPNY1SPM.2026046